

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

A remoção de pêlos com base na luz é um dos métodos mais eficazes para eliminar pêlos corporais indesejados com os resultados mais duradouros. Este é diferente dos métodos de remoção de pêlos domésticos actuais porque reduz significativamente o reaparecimento dos pêlos. A Philips investiga este método em colaboração com os melhores dermatologistas há mais de 15 anos. Agora pode utilizar esta tecnologia inovadora confortavelmente na privacidade da sua casa, sempre que desejar.

Este aparelho foi concebido especificamente e optimizado para a utilização por mulheres, mas também pode ser utilizado por homens.

O sistema Philips Lumea Essencial permite o tratamento de pêlos indesejados em todas as áreas abaixo das maçãs do rosto, incluindo o rosto (buço, queixo e bochechas), utilizando dois bocais adaptados.

O sistema Philips Lumea Essencial foi concebido apenas para uso pessoal. Por razões de higiene e para assegurar uma vida útil mais longa, aconselhamo-lo a não partilhar o aparelho com outras pessoas.

Para mais informações sobre o sistema Philips Lumea Essencial, consulte www.philips.com/lumea. Visite regularmente a nossa página inicial para verificar a existência de actualizações.

Vantagens

Este aparelho tem as seguintes vantagens:

Tecnologia de Luz Pulsada Intensa (IPL) para utilização doméstica

O sistema Philips Lumea Essencial utiliza uma tecnologia à base de luz denominada "Luz Pulsada Intensa" (IPL). A IPL também é utilizada na área da estética profissional para a remoção de pêlos e já é utilizada há mais de quinze anos. Com o sistema Philips Lumea Essencial, esta tecnologia inovadora chega agora ao conforto da sua casa.

Prevenção eficaz do reaparecimento do pêlo para uma suavidade diária

Este método proporciona-lhe uma inibição duradoura do crescimento do pêlo e uma pele suave e sedosa. Os nossos estudos demonstraram uma redução significativa dos pêlos após apenas dois tratamentos. Regra geral, os resultados ideais foram alcançados após quatro a cinco tratamentos. A redução da densidade dos pêlos é visível após cada tratamento. A velocidade a que o efeito se torna visível e a durabilidade dos resultados varia de pessoa para pessoa. Para mais informações, consulte a secção "Como obter os melhores resultados" no capítulo "Utilizar o aparelho".

Tratamento suave, mesmo em zonas do corpo sensíveis

O sistema Philips Lumea Essencial foi desenvolvido em estreita colaboração com dermatologistas qualificados para um tratamento eficaz e suave, mesmo nas zonas mais sensíveis do corpo. O acessório de precisão permite-lhe utilizar o aparelho de forma segura mesmo no rosto.

Não necessita de lâmpadas de substituição, sem custos ocultos

O sistema Philips Lumea Essencial está equipado com uma lâmpada de alto desempenho que não requer substituição. Esta lâmpada pode gerar mais de 100 000 impulsos de luz e permitir uma manutenção contínua dos resultados durante mais de 5 anos*, enquanto poupa dinheiro em lâmpadas de substituição dispendiosas.

*Com base num cenário de utilização médio e no regime de tratamentos recomendado para um utilizador.

Como funciona a tecnologia de Luz Pulsada Intensa da Philips

Crescimento do pêlo

O crescimento do pêlo difere de pessoa para pessoa, dependendo da idade, do metabolismo e de outros factores. No entanto, os pêlos de todas as pessoas crescem, normalmente, em 3 fases.

1 Fase de crescimento (fase anagénica)

O pêlo cresce activamente a partir da raiz. Nesta fase, a concentração de melanina está no seu pico. A melanina é responsável pela cor do pêlo. A concentração de melanina também é um factor determinante para a eficácia da tecnologia de luz pulsada intensa. Apenas os pêlos na fase de crescimento são susceptíveis ao tratamento com luz.

2 Fase de degradação (fase catagénica)

O crescimento do pêlo pára e a raiz encolhe antes do pêlo cair.

3 Fase de repouso (fase telogénica)





O pêlo antigo cai. O folículo permanece em descanso até o relógio biológico lhe indicar que se torne activo novamente para dar origem a um novo pêlo.

Princípio de funcionamento

- O aparelho funciona através do aquecimento do pêlo e da raiz por baixo da pele. A melanina no pêlo e na raiz absorvem a energia dos impulsos de luz. Quanto mais escura for a cor do pêlo, mais luz pode ser absorvida. Este processo estimula o pêlo a entrar na fase de repouso.
- Entre os tratamentos, o pêlo cai naturalmente e o seu crescimento é evitado. Após o tratamento, pode demorar uma ou duas semanas até o pêlo cair.

- Não é possível alcançar a redução dos pêlos numa única sessão, uma vez que apenas os pêlos na fase de crescimento são susceptíveis ao tratamento com luz. Durante o tratamento, os pêlos na zona tratada estão, normalmente, em diferentes fases do ciclo do crescimento do pêlo. Para tratar eficazmente todos os pêlos, tem de repetir o tratamento a cada duas semanas, durante os dois primeiros meses.

Um filtro óptico integrado assegura que a luz UV não alcança a pele e garante que o aparelho é seguro para a mesma quando utilizado de acordo com as orientações.

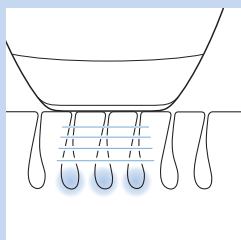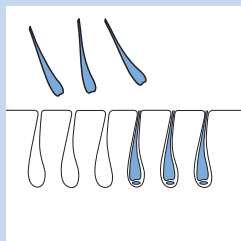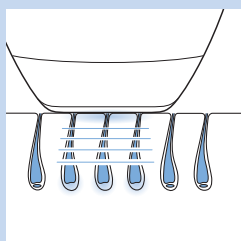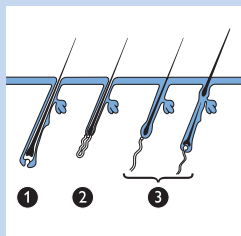

Descrição geral (fig. 5)


- 1 Luzes de intensidade (1- 5)
 - 2 Botão ligar/desligar
 - 3 Luz "Pronto para pulsar"
 - 4 Aberturas de ventilação
 - 5 Tomada do aparelho
 - 6 Botão de luz pulsada
 - 7 Aberturas para contactos electrónicos
 - 8 Janela de saída da luz com filtro UV integrado
 - 9 Acessório corporal (adequado para todas as zonas do corpo abaixo do pescoço)
 - a Contactos electrónicos
 - b Estrutura metálica no interior do acessório corporal
 - c Sistema de segurança integrado
 - d Sensor de tom de pele
 - 10 Acessório de precisão (adequado para todas as zonas do corpo, incluindo buço, queixo e bochechas)
 - a Vidro do filtro
 - b Sistema de segurança integrado
 - c Sensor de tom de pele
 - 11 Transformador
 - 12 Ficha pequena
- Inclui ainda:
- bolsa
 - pano de limpeza

Nota: O filtro principal está integrado no aparelho. Este assegura a utilização segura em áreas corporais abaixo do pescoço. Por isso, o acessório corporal não precisa de um filtro extra. No entanto, o acessório de precisão possui um filtro adicional para um tratamento seguro e agradável da pele sensível, por exemplo, da pele do rosto.

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

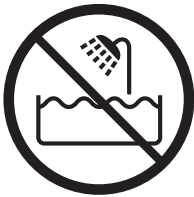

- A água e a electricidade são uma combinação perigosa! Não utilize este aparelho em ambientes húmidos (por ex., junto de uma banheira com água, um chuveiro em funcionamento ou junto a uma piscina cheia).
- Mantenha o aparelho e o transformador secos.
- Se o aparelho estiver avariado, não toque em nenhuma peça interior para evitar choques eléctricos.
- Nunca introduza nenhum objecto no aparelho.

Aviso

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- O aparelho não se destina a crianças com idade inferior a 15 anos. Adolescentes com idades entre os 15 e os 18 anos podem utilizar o aparelho com a autorização e/ou auxílio dos pais ou de pessoas com poder parental sobre eles. Adultos com idade superior a 19 anos podem utilizar o aparelho livremente.
- Utilize apenas o adaptador fornecido.
- Não utilize o aparelho ou o transformador se estiverem danificados.
- O adaptador contém um transformador: Não corte o adaptador para o substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
- Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem para evitar situações de perigo.
- Não utilize o aparelho se o vidro da janela de saída da luz estiver partido.
- Não utilize o acessório de precisão se o seu vidro avermelhado estiver danificado.

Para evitar danos

- Certifique-se de que não existem obstruções ao fluxo do ar nas ranhuras de ventilação.
- Nunca sujeitar o aparelho a choques pesados, nem agitar ou deixar cair.
- Se transportar o aparelho de ambientes muito frios para ambientes muito quentes ou vice-versa, aguarde cerca de 3 horas antes de utilizá-lo.
- Após a utilização, deixe o aparelho arrefecer e, em seguida, guarde-o dentro da bolsa fornecida para este não acumular pó.
- Nunca deixar o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado. Desligar sempre o aparelho após a utilização.
- Não exponha o aparelho à luz solar directa ou a luz UV durante períodos prolongados para evitar danos.
- Não aplique impulsos de luz sobre outras superfícies, excepto a pele. Isto pode causar danos graves nos bocais e/ou na janela de saída da luz. Aplique impulsos de luz apenas quando o aparelho está em contacto com pele.

Cuidado



- Nunca utilize o aparelho na área à volta dos olhos ou próximo das sobrancelhas para evitar danos na visão.
- Utilize este aparelho apenas em regulações adequada para o seu tipo de pele (consulte a tabela na secção "Intensidades de luz recomendadas" no capítulo "Preparar para a utilização"). Uma utilização em regulações superiores às recomendadas pode aumentar o risco de reacções da pele e efeitos secundários.
- Este aparelho destina-se apenas à remoção de pêlos corporais humanos indesejados em áreas abaixo das maçãs do rosto com os dois bocais fornecidos. Não o utilize para qualquer outro fim.

- Certifique-se de que a pele na zona a ser tratada está limpa, seca e sem de cremes, loções e outros cosméticos. Se a pele não se encontrar limpa e seca, o sistema de segurança integrado poderá não funcionar como pretendido e o aparelho poderá não aplicar impulsos ou aplicá-los inadvertidamente.
- Não utilize o aparelho se uma das situações mencionadas na secção "Contra-indicações" se aplicar a si.

Tenha em atenção os seguintes pontos para evitar uma redução da duração do sistema Philips Lumea Essencial:

- Não exponha o aparelho a temperaturas ambiente inferiores a 15 °C ou superiores a 35 °C durante a utilização.
- O aparelho está equipado com uma protecção contra sobreaquecimento incorporada. Se o aparelho sobreaquecer, este não aplica impulsos de luz. Não desligue o aparelho, deixe-o arrefecer durante cerca de 15 minutos antes de continuar com o tratamento. Depois de decorridos 5 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente. Em seguida, deixe-o arrefecer durante mais 10 minutos.
- Para verificações ou reparações, dirija-se sempre a um centro de assistência autorizado pela Philips. As reparações efectuadas por pessoal não qualificado podem originar situações extremamente perigosas para o utilizador.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Contra-indicações

O sistema Philips Lumea Essencial NÃO é adequado para quem?

O sistema Philips Lumea Essencial não é adequado a todas as pessoas. Se algumas das seguintes afirmações se aplicar a si, este aparelho **não** é adequado para si!

Não utilize o aparelho se estiver grávida ou a amamentar.

O sistema Philips Lumea Essencial não foi testado em mulheres grávidas e, por esse motivo, aconselhamos que não utilize o aparelho se estiver grávida ou a amamentar. As alterações hormonais poderão aumentar a sensibilidade da pele e o risco de ferimentos na mesma.

Não utilize o aparelho se tiver uma cor inadequada de pele e/ou de pêlo, isto é:

- Se a sua pele for do tipo V (raramente apresenta queimaduras solares, bronzeia com facilidade e o seu tom de pele é moreno escuro) ou do tipo VI (raramente ou nunca apresenta queimaduras solares e tem um bronzeado muito escuro; o seu tom de pele é castanho muito escuro ou negro); nestes casos tem um elevado risco de desenvolver reacções da pele, como descolorações da pele, vermelhidão ou queimaduras, se utilizar o sistema Philips Lumea Essencial. Consulte também o capítulo "Possíveis efeitos secundários e reacções da pele" e consulte a "Tabela das intensidades de luz recomendadas" no guia de início rápido.
- Se o tom natural do pêlo nas áreas de tratamento for loiro claro, branco, grisalho ou ruivo, o tratamento não será eficaz.

Não utilize o sistema Philips Lumea Essencial para tratar qualquer área com uma regularidade superior a uma vez a cada duas semanas.

Nunca utilize o aparelho se sofrer de uma das doenças listadas abaixo, ou seja:

- Se tiver uma doença de pele, como um cancro de pele activo, se tiver um historial de cancro de pele ou qualquer outro cancro localizado nas zonas a tratar;
- Se tiver lesões pré-cancerígenas ou sinais atípicos nas zonas a tratar;
- Se tiver um histórico de perturbações do colagénio, incluindo um histórico de formação de cicatrizes quelóides ou um histórico de cicatrização de feridas deficiente.
- Se tiver um histórico de perturbações vasculares, tais como a presença de veias varicosas ou ectasia vascular nas zonas a tratar;
- Se a sua pele for sensível à luz e desenvolver facilmente uma erupção ou reacção alérgica.
- Se tiver infecções, eczemas, queimaduras, inflamações dos folículos dos pêlos, lacerações abertas, abrasões, herpes, feridas ou lesões e hematomas nas zonas a tratar;
- Se tiver sido submetido a cirurgias nas áreas a tratar;
- Se tiver epilepsia com sensibilidade à luz pulsada.
- Se tiver diabetes, lúpus eritematoso, porfíria ou doença cardíaca congestiva.
- Se tiver qualquer perturbação hemorrágica.
- Se tiver um histórico de doença imunossupressora (incluindo infecção por HIV ou SIDA).

Nunca utilize o aparelho se tomar algumas das medicações listadas abaixo, ou seja:

- Se a sua pele estiver a ser tratada actualmente ou tiver sido recentemente tratada com Alfa-Hidroxiácidos (AHA), Ácidos Hidroxibeta (BHA), isotretinoína tópica e ácido azelaico.
- Se tiver tomado alguma forma de isotretinoína, como Accutane® ou Roaccutane® nos últimos seis meses. Este tratamento pode tornar a pele mais susceptível a gretas, feridas e irritações.
- Se tomar analgésicos que reduzem a sensibilidade da pele ao calor.
- Se estiver a tomar agentes ou medicação fotossensíveis, consulte a literatura inclusa dos seus medicamentos. Nunca utilize o aparelho se as instruções do medicamento incluírem avisos relativos a reacções fotoalérgicas, reacções fototóxicas ou se tiver de evitar a exposição solar durante a utilização deste medicamento.
- Se tomar anticoagulantes, incluindo a utilização intensa de aspirina de uma forma que não permita uma interrupção da utilização, no mínimo, uma semana antes de cada tratamento com o sistema Philips Lumea Essencial.
- Se tomar medicação imunossupressora.



Nunca utilize o aparelho nas seguintes áreas:

- Na zona à volta dos olhos e próxima das sobrancelhas.
- Nos mamilos, aréolas, pequenos lábios, vagina, ânus e o interior das narinas e orelhas. Consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Utilizar o aparelho na linha do biquíni".
- Os homens não devem utilizá-lo no rosto nem no escroto. Os pêlos faciais masculinos são diferentes dos pêlos faciais femininos e o acessório de precisão foi concebido apenas para o tratamento de pêlos faciais em mulheres.
- Sobre ou perto de componentes artificiais como implantes de silicone, pacemakers, portas de injeção subcutâneas (doseador de insulina) ou piercings.
- Em sinais, sardas, veias grandes, zonas com pigmentação mais escura, cicatrizes ou outras anomalias da pele sem consultar o seu médico. Caso contrário, pode resultar numa queimadura ou mudança de cor da pele, o que pode dificultar significativamente a identificação de doenças de pele (por exemplo, cancro da pele).
- Em verrugas, tatuagens ou maquilhagem permanente. Isto pode resultar em queimaduras e numa mudança do tom da pele (hipopigmentação ou hiperpigmentação). A utilização em verrugas pode espalhá-las, visto que as verrugas são infecções virais.
- Em zonas onde utiliza desodorizantes de longa duração. Isto pode provocar reacções da pele. Consulte o capítulo "Possíveis efeitos secundários e reacções da pele".



Nunca utilize o aparelho sobre uma queimadura solar e pele recentemente bronzada ao sol (últimas 2 semanas) ou com métodos artificiais.

- Todos os tipos de bronzamento podem influenciar a segurança do tratamento. Isto aplica-se à exposição à luz natural do sol, bem como aos métodos de bronzamento artificial, como loções bronzeadoras, aparelhos para bronzear, etc. Se estiver bronzado ou estiver a planear bronzear-se, consulte o capítulo "Preparação para a utilização", secção "Conselhos de bronzamento".

Nota: Esta lista não é exaustiva. Se não tiver a certeza se pode utilizar o aparelho, aconselhamo-lo a consultar um médico.

Possíveis efeitos secundários e reacções da pele

Reacções comuns da pele:

- A sua pele pode apresentar uma ligeira vermelhidão e/ou picadas, formiguento ou estar quente. Esta reacção é inofensiva e desaparece rapidamente.
- Pode surgir uma reacção da pele semelhante a uma queimadura solar na área tratada durante um curto período de tempo. Se não desaparecer no prazo de 3 dias, aconselhamo-lo a consultar um médico.
- O corte do pêlo com lâmina ou a combinação do corte do pêlo com lâmina e do tratamento com luz pode provocar pele seca e comichão. Isto é inofensivo e desaparece em alguns dias. Pode refrescar a zona com gelo ou uma toalha de rosto molhada. Se a pele se mantiver seca, pode aplicar um hidratante não perfumado na área tratada, 24 horas depois do tratamento.

Efeitos secundários raros

- Queimaduras, vermelhidão intensa e inchaço: estas reacções raramente ocorrem e são o resultado de uma intensidade de luz demasiado elevada para o tom da sua pele. Se estas reacções não desaparecerem num período de 3 dias, aconselhamo-lo a consultar um médico. Não efectue o tratamento seguinte até a pele ter cicatrizado completamente e certifique-se de que usa uma intensidade de luz mais reduzida.
- Descoloração da pele: isto raramente ocorre. A descoloração da pele manifesta-se através de uma mancha mais clara ou mais escura do que a área circundante. Este é o resultado da utilização de uma intensidade de luz demasiado elevada para a cor da sua pele. Se a descoloração não desaparecer num prazo de 2 semanas, aconselhamo-lo a consultar um médico. Não trate áreas com descoloração até esta desaparecer e a sua pele voltar a apresentar o seu tom normal.
- Infecção e inflamação da pele: isto raramente ocorre e pode ser causado pela utilização do aparelho em ferimentos ou cortes resultantes do corte do pêlo com lâmina, em ferimentos já existentes ou em pêlos encravados.
- Dor excessiva: isto pode ocorrer durante ou após o tratamento se utilizar o aparelho em pele ainda com pêlos, se utilizar uma intensidade de luz demasiado elevada para o seu tom de pele, se aplicar impulsos várias vezes na mesma área e se utilizar o aparelho em feridas abertas, inflamações, infecções, tatuagens, queimaduras, etc. Consulte o capítulo "Contra-indicações" para mais informações.

Após a utilização

- Não aplique cosméticos perfumados nas áreas tratadas imediatamente após o tratamento.
- Não utilize desodorizante imediatamente após o tratamento das axilas. Aguarde até a vermelhidão desaparecer totalmente.
- Consulte o capítulo "Preparação para a utilização", secção "Conselhos de bronzeamento" para mais informações relativas à exposição solar e ao bronzeamento artificial.

Preparar para a utilização


Para obter os melhores resultados, prepare as áreas onde pretende utilizar o aparelho da forma descrita em seguida.

Preparar as áreas de tratamento

- 1** Corte o pêlo com uma lâmina nas zonas que pretende tratar enquanto verificar crescimento do pêlo.

Nota: Não utilize cremes depilatórios em vez do corte com lâmina.

Nota: Se o seu último método de depilação utilizado envolveu a remoção de pêlos pela raiz (p. ex., utilização de uma depiladora), pode iniciar o tratamento de imediato. Neste caso, aconselhamos que corte os pêlos com uma lâmina entre os tratamentos de modo a obter resultados perfeitos.

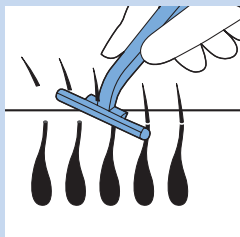

Tenha em atenção que o tratamento em áreas cujo pêlo não foi cortado ou foi cortado incorrectamente tem vários efeitos indesejados:

- A janela de saída da luz e os bocais podem ser contaminados com pêlos soltos e sujidade. Uma janela de saída da luz e bocais contaminados podem reduzir a vida útil e a eficácia do aparelho. A contaminação da janela de saída da luz também pode tornar o tratamento doloroso ou provocar reacções da pele, como vermelhidão e descoloração.
- Os pêlos na sua pele podem ser queimados, o que pode provocar um odor desagradável.

2 Limpe a pele e certifique-se de que esta não tem pêlos, está completamente seca e sem resíduos gordurosos (por exemplo, vestígios de desodorizantes, loções, perfumes, creme bronzadores e protectores solares).

3 Verifique se o aparelho, especialmente a janela de saída da luz e os bocais, tem pêlos, pó ou fibras presos. Se encontrar algum tipo de contaminação, limpe o aparelho de acordo com as instruções no capítulo “Limpeza e manutenção”.

Se o corte dos pêlos com uma lâmina provocar ferimentos ou lesões, a sua pele pode ser mais sensível à tecnologia IPL do que a de outros utilizadores. Isto poderá fazer com que o tratamento por IPL seja desconfortável ou poderá resultar em outros efeitos secundários indesejáveis. Recomendamos que aguarde até que a irritação tenha desaparecido.

4 Depois dos pêlos pararem de crescer, o que normalmente acontece após 4 a 5 tratamentos, não terá de voltar a cortar o pêlo antes de utilizar o aparelho.

Intensidade da luz

Ao contrário dos aparelhos à base de luz profissionais, o sistema Philips Lumea Essencial foi desenvolvido para utilização doméstica do consumidor e os seus impulsos de luz são mais delicados. Consequentemente, pode contar com um tratamento **cómodo e eficaz** a uma intensidade de luz que considerar confortável.

O sistema Philips Lumea Essencial oferece cinco intensidades de luz diferentes. Ajuste a intensidade da luz ao tom da sua pele, aos pêlos corporais, aos pêlos faciais e a um nível confortável para si. A tabela das intensidades de luz recomendadas apresentada abaixo ajuda-o a determinar a intensidade da luz correcta.

Nota: O aparelho é desactivado automaticamente se a sua pele for demasiado escura, para evitar que desenvolva reacções da pele. No entanto, o sensor de tom de pele integrado não lhe indica qual regulação da intensidade da luz deve utilizar, visto que as preferências diferem significativamente de pessoa para pessoa. O sistema Philips Lumea Essencial dá-lhe a liberdade de escolher a intensidade de luz que considerar mais conveniente, desde que o aparelho seja adequado para o seu tom de pele. Para determinar a intensidade da luz correcta para a utilização na sua pele, consulte a tabela das intensidades de luz recomendadas e o guia de início rápido.

- 1** Consulte a tabela abaixo para determinar que intensidades de luz são apropriadas para a sua pele, o seu tom de pele, a cor dos seus pêlos corporais e pêlos faciais (se não existir uma intensidade da luz apropriada para a sua combinação de tom de pele/cor do pêlo, isto é indicado na tabela por um x).

Sugestão: Pode colocar a tabela incluída no guia de início rápido junto à pele e compará-la com a sua cor de pele.

Sugestão: Recomendamos que guarde o guia de início rápido na bolsa para referência futura.

- 2** Reduza a intensidade da luz se sentir dor ou desconforto.

As pessoas com pele mais escura têm maior risco de irritação da pele, uma vez que a sua pele absorve mais luz. Consequentemente, são recomendadas intensidades de luz mais reduzidas para pessoas com a pele mais escura.

O impulso de luz pode provocar calor na pele, mas nunca deve provocar dor. Diferentes zonas corporais exigem intensidades da luz diferentes, consulte a tabela abaixo. Para evitar reacções da pele, consulte o capítulo "Possíveis efeitos secundários e reacções da pele".

Intensidades de luz recomendadas (1-5)

Na tabela abaixo, os números indicam a intensidade da luz a ser seleccionada e "x" significa o aparelho não é apropriado para si.

Nota: O tom da sua pele pode mudar, por exemplo devido ao bronzamento. Esta pode estar mais escura do que no tratamento anterior. Por isso, é importante que verifique a regulação a utilizar antes de cada tratamento e em cada zona. Algumas zonas podem ser mais escuras do que outras.

Cor dos pêlos corporais:	Louro escuro/castanho claro/castanho escuro/preto	branco/grisalho/ruivo/louro claro
<i>Tons e características da pele:</i>		
Branco (queima sempre com o sol, não bronzeia)	4/5	x
Bege (queima facilmente, bronzado mínimo)	4/5	x
Castanho claro (por vezes queima, bom bronzado)	4/5	x
Castanho médio (raramente queima, bom bronzado e rápido)	1/2/3	x
Castanho escuro (raramente queima, bronzado muito bom)	x	x
Castanho escuro e preto (raramente ou nunca queima, bronzado muito escuro)	x	x

Importante

Para verificar se o sistema Philips Lumea Essencial é adequado para si, consulte o capítulo "Contra-indicações".

Conselhos de bronzeamento



- **Evite expor-se ao sol quando utilizar o sistema Philips Lumea Essencial regularmente (a cada duas semanas).**

A exposição solar pode provocar o escurecimento da pele (bronzeamento) ou provocar queimaduras solares (vermelhidão na pele). A utilização do sistema Philips Lumea Essencial em pele escurecida (bronzeada) e/ou pele queimada pelo sol aumenta o risco de efeitos secundários adversos e de reacções da pele. Consulte o capítulo “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele”.

- **Exposição solar antes do tratamento: aguarde 2 semanas e efectue um teste de pele.**

Aguarde, no mínimo, 2 semanas depois da exposição solar antes de utilizar o aparelho. Efectue um teste de pele (consulte o capítulo “Utilizar o aparelho”, secção “Primeira utilização e teste de pele”) na área a tratar para determinar a intensidade de luz apropriada. Se não o fizer, aumenta o risco de desenvolver reacções da pele após o tratamento com o sistema Philips Lumea Essencial.

- **Exposição solar depois do tratamento: aguarde 48 horas antes de se expor ao sol depois do tratamento com o sistema Philips Lumea Essencial.**

Aguarde, no mínimo, 48 horas após o tratamento antes de expor as áreas tratadas ao sol. Mesmo depois de decorridas 48 horas, certifique-se de que a pele tratada já não apresenta reacções adversas ao tratamento, antes de se expor ao sol. Cubra as áreas tratadas antes de se expor ao sol ou utilize um protector solar total (SPF 30+) nas duas semanas posteriores ao tratamento. A exposição solar das áreas tratadas imediatamente após o tratamento sem qualquer protecção aumenta o risco de efeitos secundários adversos e de reacções da pele. Consulte o capítulo “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele”.

- **Bronzeamento com luz artificial**

Siga as instruções fornecidas anteriormente em “Exposição solar antes do tratamento” e “Exposição solar após o tratamento”.

- **Bronzeamento com cremes**

Se tiver utilizado uma loção bronzeadora artificial, aguarde até o bronzeado artificial desaparecer totalmente antes de utilizar o sistema Philips Lumea Essencial.

Nota: Para mais informações sobre reacções indesejadas da pele, consulte o capítulo “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele”.


Utilizar o aparelho

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparação para a utilização”, secção “Intensidade da luz” para determinar que intensidades de luz são mais adequadas ao seu tom de pele e cor do pêlo. Utilize o aparelho numa divisão bem iluminada; isto reduz a luminosidade do impulso de luz.

Corte o pêlo da área que pretende tratar antes de utilizar o aparelho (consulte o capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Preparar as áreas de tratamento”).

Se o tratamento se tornar doloroso em qualquer momento, reduza a regulação da intensidade da luz até o tratamento ser novamente confortável. Se detectar reacções da pele mais intensas do que uma leve vermelhidão, pare o tratamento de imediato e leia a secção “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele” neste capítulo.


Seleção do acessório correcto

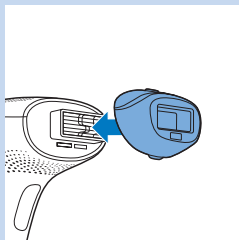

- Acessório corporal

O acessório corporal pode ser utilizado para tratar pêlos corporais indesejados em todas as zonas do corpo abaixo do pescoço (para conhecer as excepções, consulte o capítulo “Contra-indicações”). O acessório corporal consegue abranger uma área de 4 cm² e foi concebido especificamente para um tratamento mais rápido de áreas maiores, como as pernas.

Nunca utilize o acessório corporal no rosto.

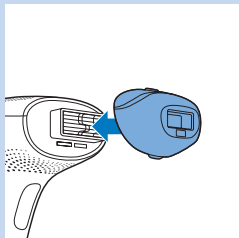


- Acessório de precisão

O acessório de precisão inclui um filtro de luz integrado adicional e pode ser utilizado para tratar pêlos faciais indesejados de forma segura no buço, queixo e bochechas. Este também pode ser utilizado noutras áreas sensíveis do corpo, como as axilas e a linha do biquíni ou áreas difíceis de alcançar.

Nunca utilize o aparelho na zona à volta dos olhos ou próxima das sobrancelhas.


Primeira utilização e teste de pele

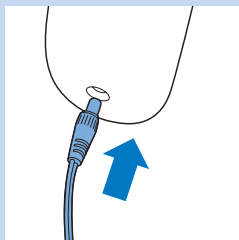


Quando utiliza o aparelho pela primeira vez ou após um bronzamento recente, recomendamos que efectue um teste na pele em **cada** zona a tratar para verificar a reacção da pele ao tratamento e para se habituar ao tratamento à base de luz.

- 1** Escolha o acessório apropriado para a zona que pretende tratar.
- 2** Escolha uma área próxima da zona que pretende tratar.
- 3** Introduza a ficha pequena no aparelho e coloque o adaptador na tomada eléctrica.

Nota: Assegure-se de que o acessório seleccionado está colocado no aparelho.

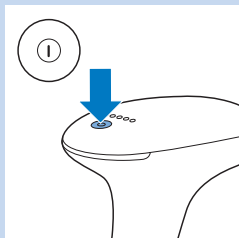


- 4** Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.

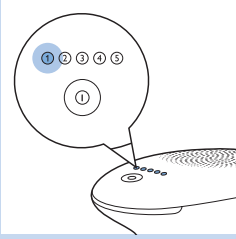

- ▶ A luz de intensidade 1 acende-se.

Nota: O aparelho selecciona sempre automaticamente a definição mais baixa da intensidade da luz. Consulte a secção “Intensidade da luz” no capítulo “Preparar para a utilização” para determinar a intensidade da luz apropriada.


- 5 Para ajustar a definição da intensidade da luz, prima o botão ligar/desligar uma ou mais vezes até alcançar a definição necessária. A intensidade de luz correspondente acende-se.

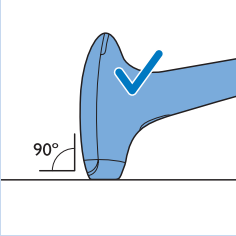


- 6 Coloque o aparelho sobre a pele a um ângulo de 90° para que o acessório esteja em contacto com a pele. Pressione o aparelho firmemente contra a pele para garantir o contacto.

Sugestão: Para uma utilização mais fácil, estique a zona da pele que pretende tratar.


- ▶ O aparelho executa automaticamente uma análise do tom de pele.

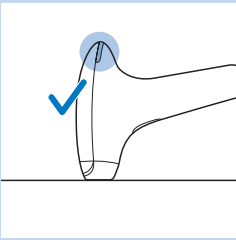

- Quando a luz “pronto a pulsar” se acende a branco na parte posterior do aparelho, a sua pele é apropriada para o tratamento com o aparelho e pode continuar:

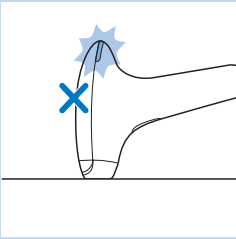


- Quando a luz “pronto a pulsar” primeiro fica intermitente a cor de laranja e, em seguida, mantém-se continuamente acesa a laranja, a sua pele não é apropriada para o tratamento com o aparelho e este está desactivado. Poderá ser capaz de utilizar o sistema Philips Lumea Essencial com zonas corporais menos bronzeadas ou naturalmente mais claras. Se isto não funcionar, contacte o Apoio ao Cliente da Philips.

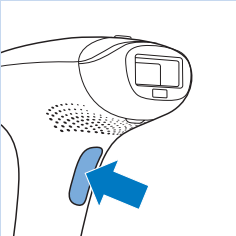

- 7 Prima o botão de impulso para libertar um impulso de luz.

*Nota: A luz visível produzida pelo aparelho é o reflexo do impulso de luz sobre a pele e é inofensiva para os seus olhos. Não é necessário usar óculos de protecção durante a utilização. Utilize o aparelho numa divisão **bem iluminada**; isto reduz o brilho perceptível do impulso de luz.*

- 8 Solte o botão de impulso assim que o aparelho aplicar o impulso de luz.

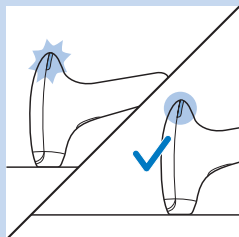

- ▶ A luz “pronto a pulsar” fica intermitente a branco para indicar que o aparelho se está a preparar para aplicar um impulso de luz.
- ▶ Quando o aparelho está pronto para aplicar um impulso, a luz “pronto a pulsar” mantém-se continuamente acesa a branco.

9 Deslize o aparelho sobre a pele até à próxima área a tratar. Enquanto o tratamento for confortável (não doloroso), aumente um nível da regulação dentro do intervalo recomendado para o seu tipo de pele e aplique um impulso de luz para cada regulação. **Não aplique vários impulsos de luz na mesma área.**

10 Quando terminar o tratamento, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 2 segundos para desligar o aparelho.

11 Depois do teste da pele, aguarde 24 horas e verifique se a sua pele tem alguma reacção. Se a pele apresentar reacções, seleccione a definição mais alta que não provocou nenhuma reacção na pele para as utilizações seguintes.

Utilizações seguintes

1 Antes de cada tratamento, limpe a janela de saída da luz, o exterior dos bocais, as estruturas metálicas no interior dos bocais e o vidro avermelhado do filtro no interior do acessório de precisão. Para mais informações, consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”.

2 Comece cada tratamento seleccionando cuidadosamente a intensidade de luz, com base na sensibilidade da sua pele e no conforto que sente durante o tratamento. Consulte a secção “Intensidades da luz recomendadas” para seleccionar a definição certa para a sua combinação de tipo de pele e cor de pêlo.

A sua pele pode reagir de diferentes formas em diferentes dias/ocasiões por inúmeras razões. Consulte o capítulo “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele” para obter mais informações.


3 Siga os passos 2-7 da secção anterior (“Primeira utilização e teste de pele”).

Nota: É normal que o aparelho e o acessório aqueçam durante a utilização.

4 Deslize o aparelho sobre a pele até à próxima zona a tratar e repita os passos 5 e 6 da secção “Primeira utilização e teste de pele” neste capítulo. Depois de cada impulso de luz, demora até 3,5 segundos até o aparelho estar pronto para aplicar um novo impulso. A luz “pronto a pulsar” na parte posterior do aparelho fica novamente intermitente a branco para indicar que este está a carregar. Aguarde até esta luz permanecer continuamente acesa antes de continuar.

Sugestão: Para um tratamento mais eficiente, mantenha o botão de impulso premido enquanto desloca o aparelho sobre a sua pele.

Não trate exactamente a mesma área várias vezes durante uma sessão. Isto não melhora a eficácia do aparelho, mas aumenta o risco de reacções da pele.

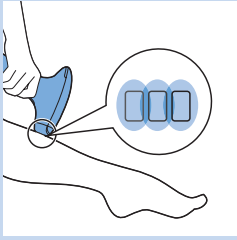

- 5** Para evitar zonas não tratadas, certifique-se de que os impulsos de luz são aplicados juntos uns aos outros. Tenha em atenção que luz efectiva só sai pela janela de saída da luz. No entanto, assegure-se sempre de que não aplica impulsos duas vezes na mesma zona.
- 6** Quando terminar o tratamento, mantenha o botão ligar/desligar premido durante 2 segundos para desligar o aparelho.
- 7** Verifique se a janela de saída da luz e os bocais apresentam pêlos e sujidade e limpe o aparelho depois da utilização (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).

Plano de tratamento e a eficácia

Um típico ciclo de crescimento completo do pêlo pode demorar entre 18 e 24 meses. Durante este tempo, poderão ser necessários vários tratamentos com o sistema Philips Lumea Essencial para obter uma redução permanente dos pêlos.

A eficácia da redução de pêlos varia de pessoa para pessoa, de acordo com a zona do corpo, a cor do pêlo e a forma como o sistema Philips Lumea Essencial é utilizado.

Como obter os melhores resultados

- É normal que ainda existam pêlos depois dos primeiros tratamentos (consulte o capítulo “Importante”, secção “Princípio de funcionamento” para mais informações).
- Para remover todos os pêlos com sucesso e evitar a reactivação do folículo do pêlo, os tratamentos têm de ser repetidos uma vez a cada duas semanas durante os dois primeiros meses. Por essa altura, a sua pele estará macia e sem pêlos. Leia a secção “Fase de manutenção” para saber como pode manter estes resultados.

Fase de manutenção

- Para garantir que a sua pele se mantém suave e sem pêlos, recomendamos a repetição do tratamento em intervalos de quatro a seis semanas. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal e também das diferentes zonas corporais. Se voltarem a crescer demasiados pêlos entre os tratamentos, basta reduzir novamente o intervalo entre os tratamentos, mas nunca efectue o tratamento com uma regularidade superior a cada duas semanas. Se utilizar o aparelho com uma regularidade superior à recomendada, não aumenta a eficácia do tratamento, mas aumenta o risco de reacções da pele.

Directrizes para o tratamento

Tempo médio de tratamento

Zona	Tempo de tratamento aproximado	Acessório recomendado
Axilas	1 minuto por axila	Acessório para o corpo/de precisão
Linha do biquíni	1 minuto de cada lado	Acessório para o corpo/de precisão
Toda a zona do biquíni	4 minutos	Acessório para o corpo/de precisão
Uma perna abaixo do joelho	8 minutos	Acessório corporal
Uma perna inteira	14 minutos	Acessório corporal
Buço/queixo/bochechas	1 minuto	Acessório de precisão

Nota: Os tempos médios de tratamento indicados acima foram determinados durante a investigação e testes. Os tempos de tratamento individuais podem variar de pessoa para pessoa.

Zonas de tratamento pretendidas

O aparelho destina-se a tratar pêlos indesejados no buço, queixo, bochechas, axilas, braços, barriga, linha do biquíni, costas e pernas.

Utilização do aparelho nas pernas

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Intensidade da luz” para consultar as definições adequadas para as suas pernas.


- Pode deslocar o aparelho para cima e para baixo ou ao longo da perna, da forma que for mais conveniente para si. Para manter o contacto total com a pele, também pode colocar e segurar o aparelho sobre a pele numa posição lateral.

Nota: As zonas com mais osso e menos carne, como a canela e os tornozelos, são mais sensíveis do que outras zonas do corpo. Quando pressiona o acessório com força sobre estas zonas, a pele pode ficar mais susceptível a reacções da pele, como irritação e vermelhidão. Consulte o capítulo “Possíveis efeitos secundários e reacções da pele”. Pressione o acessório sobre a pele apenas o suficiente para a luz “pronto a pulsar” acender.

Utilizar o aparelho na linha do biquíni

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Intensidade da luz” para consultar as definições adequadas para a sua linha do biquíni.

Normalmente, o sistema Philips Lumea Essencial é seguro e suficientemente suave para o tratamento da área total da zona do biquíni (por exemplo para depilação “brasileira” ou o estilo de “Hollywood”). Utilize uma definição mais baixa na pele mais sensível com pigmentação mais escura na zona do biquíni. Não utilize o aparelho nos pequenos lábios, vagina e ânus. Os homens que desejam tratar a sua área púbica não devem utilizar o aparelho no escroto.

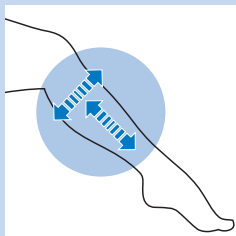

Nota: Se quiser deixar alguma área com pêlo, por exemplo, no caso de uma depilação “brasileira”, certifique-se de que o sensor do tom de pele não é colocado sobre esses pêlos durante o tratamento, pois isto pode provocar o bloqueio do aparelho.

Nota: Por motivos de higiene, limpe sempre o acessório antes de começar a tratar outra zona do corpo (consulte o capítulo “Limpeza e manutenção”).

Utilização do aparelho nas axilas

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Regular a intensidade da luz” para consultar as definições adequadas para as suas axilas. Assegure-se de que elimina qualquer desodorizante, perfume, creme ou outro produto de cuidado da pele das suas axilas antes do tratamento.

Sugestão: Para obter resultados perfeitos nas axilas, posicione-se em frente a um espelho para conseguir ver bem a zona a tratar e a luz “pronto a pulsar”. Levante o braço e coloque a mão na zona traseira do pescoço para esticar a pele da zona da axila.

Nota: A luz reflectida não prejudica os seus olhos. Se a luz dispersa for desagradável, feche os seus olhos quando libertar um impulso de luz.

Utilizar o aparelho no rosto (buço, queixo e bochechas)

Verifique a tabela de intensidades de luz recomendadas no capítulo “Preparar para a utilização”, secção “Regular a intensidade da luz” para consultar as definições adequadas para o seu rosto (buço, queixo e bochechas).

Utilize apenas o **acessório de precisão** para tratar o buço, queixo e bochechas. Nunca utilize o aparelho na zona à volta dos olhos ou próxima das sobrancelhas. Quando trata o buço, o queixo ou as bochechas, assegure-se de que não expõe o rosto à luz solar directa durante 24 horas após o tratamento. Aplique um protector solar total (SPF 30+) depois do tratamento, durante as duas semanas seguintes, quando expuser o rosto à luz solar directa.


Atenção: Ao tratar a área acima do seu lábio superior, tenha cuidado para não aplicar impulsos de luz no lábio.

Sugestão: Aplique uma camada grossa de lápis de olhos branco nos seus lábios e nos contornos destes. Esta linha branca assegura que a energia do impulso de luz é reflectida e não afecta os seus lábios, caso aplique um impulso de luz no lábio inadvertidamente. Utilize apenas um lápis de olhos branco. Qualquer outra cor absorve a luz e pode causar irritação da pele.

Sugestão: Para obter resultados perfeitos no buço, no queixo e nas bochechas, posicione-se em frente a um espelho para conseguir ver bem a área a tratar e a luz “pronto a pulsar”.

Sugestão: Devido aos contornos do maxilar, pode ser difícil assegurar o contacto total do sistema de segurança integrado com a pele e aplicar um impulso de luz. Coloque a sua língua entre os dentes e parte acima do lábio ou encha as bochechas com ar para facilitar o tratamento.

Sugestão: A luz reflectida não prejudica os seus olhos. Se a luz dispersa for desagradável, feche os seus olhos quando libertar um impulso de luz.

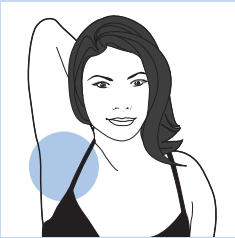

Limpeza e manutenção



Para garantir resultados otimizados e uma longa durabilidade do aparelho, limpe-o antes e depois de cada utilização e, se necessário, durante o tratamento. O aparelho perde a sua eficácia se não o limpar adequadamente.

Nunca limpe o aparelho ou qualquer das suas peças sob a torneira ou na máquina de lavar louça.

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Nunca risque a janela de saída da luz nem a superfície metálica dentro do acessório corporal.

Nota: Não volte a utilizar o aparelho quando já não for possível limpar a janela de saída da luz ou os bocais.

- 1 Desactive e desligue o aparelho e permita que arrefeça.

Nota: A janela de saída da luz aquece durante a utilização. Certifique-se de que esta já arrefeceu antes de a limpar.

- 2 Para retirar o acessório, agarre as projecções na parte superior e inferior do acessório e puxe suavemente.

- 3 Se necessário, limpe o exterior do aparelho com o pano de limpeza macio fornecido com o aparelho.



- 4 Humedeça o pano macio fornecido com o aparelho com algumas gotas de água e use-o para limpar as seguintes áreas:

- a janela de saída da luz
- a superfície exterior dos bocais
- as estruturas metálicas no interior dos bocais
- o vidro avermelhado do filtro dentro do acessório de precisão

Assegure-se de que os contactos electrónicos não entram em contacto com água.

Nota: Se a água não limpar de forma eficaz, utilize algumas gotas de álcool de percentagem elevada para limpar as áreas mencionadas anteriormente.

Nota: Assegure-se de que limpa o aparelho antes e depois de cada utilização e, se necessário, também durante o tratamento de acordo com as instruções nesta secção.

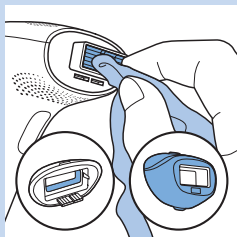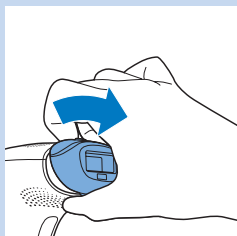

Arrumação

- 1 Desactive e desligue o aparelho e permita que arrefeça.

- 2 Limpe o aparelho antes de guardá-lo.

- 3 Guarde o aparelho e os bocais na bolsa fornecida a uma temperatura entre -20 °C e +70 °C.

Sugestão: Recomendamos que guarde o guia de início rápido na bolsa para referência futura.

Encomendar bocais

Para comprar bocais ou peças sobressalentes, visite **www.shop.philips.com/service** ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).

Peças sobressalentes

Estão disponíveis as seguintes peças sobressalentes:

- Acessório corporal (referência 4222.100.1629)
- Acessório de precisão (referência 4222.100.1630)
- Transformador
- Pano de limpeza
- Bolsa

Meio ambiente



- No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos normais; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo ajuda a preservar o ambiente.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite **www.philips.com/support** ou leia o folheto da garantia mundial em separado.

Especificações técnicas

Modelo SC1996

Voltagem efectiva	100 V - 240 V
Frequência efectiva	50 Hz - 60 Hz
Entrada	36 W
Protecção contra choques eléctricos	Classe II
Classificação da protecção	IP 30 (EN 60529)
Condições de funcionamento	Temperatura: +15° a +35°C Humidade relativa: 30% a 95%
Condições de arrumação	Temperatura: -20 °C a +70 °C Humidade relativa: 5% a 95%
Espectro do acessório para o corpo	>500 nm
Espectro do acessório de precisão	>600 nm

Transformador	Modelo: S036NU2400150
Efectiva	100-240V, 50/60 Hz, 100 mA
Protecção contra choques eléctricos	Fonte de alimentação de classe 2 Não adequado para utilização na presença de anestésicos inflamáveis com ar, oxigénio e óxido nitroso. Temperatura e humidade normais para armazenamento e transporte. Método de funcionamento contínuo com carga intermitente.



- Não exponha a humidade excessiva nem chuva.



- Protecção contra choques eléctricos: peça aplicada do tipo BF.



- Dispositivo frágil.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O transformador/ aparelho aquece durante o carregamento.	É normal.	Não é necessária qualquer acção.
Liguei o aparelho, mas não consigo aumentar ou reduzir a intensidade da luz.	O aparelho tem de ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue e ligue o aparelho novamente. Se mesmo assim não conseguir ajustar a intensidade da luz, contacte o Centro de Assistência ao Consumidor no seu país, o seu representante Philips ou um centro de serviço Philips.
A luz "pronto a pulsar" não funciona quando coloco o aparelho sobre a pele.	Não colocou o aparelho correctamente sobre a pele.	Coloque o aparelho a um ângulo de 90° sobre a pele de forma a que os 4 lados do sistema de segurança integrado estejam em contacto com a pele. Em seguida, verifique se a luz "pronto a pulsar" permanece continuamente acesa a branco e prima o botão de impulso.
		Se isto não funcionar, coloque o aparelho numa parte do corpo em que seja fácil estabelecer contacto com a pele, por exemplo, no antebraço. Em seguida, verifique se a luz "pronto a pulsar" funciona. Se a luz "pronto a pulsar" não ficar intermitente ao colocar o aparelho sobre a pele, contacte o Centro de Apoio ao Cliente, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
A luz "pronto a pulsar" fica intermitente a cor de laranja e, em seguida, mantém-se continuamente acesa a cor de laranja quando coloco o aparelho sobre a pele. O aparelho não aplica um impulso de luz.	A pele que está a tentar tratar é demasiado escura.	Para evitar que a sua pele desenvolva efeitos secundários, o aparelho não funciona em pele demasiado escura. Poderá ser capaz de utilizar o sistema Philips Lumea Essencial em zonas do corpo com a pele mais clara. Se isto não resultar, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
A luz "pronto a pulsar" não funciona ao colocar o acessório sobre a pele, mas a ventoinha de arrefecimento funciona.	A protecção de sobreaquecimento foi activada.	Quando a protecção contra sobreaquecimento é activada, a ventoinha de arrefecimento continua a funcionar. Não desligue o aparelho. Deixe-o arrefecer durante cerca de 15 minutos antes de continuar a utilizá-lo. Depois de decorridos 5 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente. Em seguida, deixe-o arrefecer durante mais 10 minutos. Se a luz "pronto a pulsar" continuar a não funcionar quando coloca o aparelho sobre a pele, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.

Problema	Possível causa	Solução
A luz "pronto a pulsar" permanece continuamente acesa, mas o aparelho não produz um impulso quando primo o botão de impulso.	O aparelho tem de ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue e ligue o aparelho novamente. Se a luz "pronto a pulsar" permanecer continuamente acesa, mas o aparelho continuar a não produzir um impulso ao premir o botão de impulso, contacte o Centro de Assistência ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
A luz da intensidade 1 continua intermitente e não consigo mudar a definição.	O acessório não está colocado no aparelho correctamente.	Coloque o acessório no aparelho correctamente.
As luzes de intensidade acendem-se todas alternadamente.	O aparelho tem de ser reiniciado.	Para reiniciar o aparelho, desligue e ligue o aparelho novamente. Se as luzes de intensidade continuarem a acender-se alternadamente, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
As luzes de intensidade estão todas intermitentes em simultâneo.	O aparelho está defeituoso.	Contacte o Centro de Assistência ao Cliente no seu país, o seu representante Philips ou um centro de serviço Philips.
O aparelho produz um odor estranho.	O acessório e/ou o vidro do filtro estão sujos.	Limpe cuidadosamente o acessório e a janela de saída da luz. Se não conseguir limpar o acessório correctamente, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips para substituir o acessório.
	Não cortou correctamente os pêlos com uma lâmina na zona a tratar:	Se a zona a ser tratada tiver pêlos, estes poderão ser queimados durante a utilização do aparelho. Consequentemente, poderá notar um odor estranho. Corte adequadamente os pêlos com uma lâmina na área a ser tratada, antes de utilizar o aparelho. Se o corte do pêlo provocar irritação, apare os pêlos até estes ficarem o mais curtos possível e utilize o sistema Philips Lumea Essencial numa regulação confortável.
	Guardou o aparelho num ambiente poeirento.	Limpe o aparelho e os bocais (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").

Problema	Possível causa	Solução
A pele fica mais sensível do que habitualmente durante o tratamento.	A intensidade de luz utilizada é demasiado elevada.	Verifique se utilizou a intensidade de luz correcta. Se necessário, seleccione uma intensidade de luz inferior:
	Não cortou os pêlos com uma lâmina na zona a tratar.	Corte os pêlos com uma lâmina nas áreas a tratar; antes de utilizar o aparelho. Se o corte do pêlo provocar irritação, apare os pêlos até estes ficarem o mais curtos possível e utilize o sistema Philips Lumea Essencial numa regulação confortável.
	A janela de saída da luz está partida.	Se a janela de saída da luz estiver partida, não utilize o aparelho para evitar o risco de reacções da pele. Contacte o Centro de Apoio ao Cliente do seu país, o seu revendedor Philips ou um centro de assistência Philips.
Sinto uma dor intolerável quando utilizo o aparelho.	Não cortou os pêlos com lâmina na zona a tratar.	Corte os pêlos com uma lâmina nas áreas a tratar; antes de utilizar o aparelho. Se o corte do pêlo provocar irritação, apare os pêlos até estes ficarem o mais curtos possível e utilize o sistema Philips Lumea Essencial numa regulação confortável.
	Tratou uma zona para a qual o aparelho não se destina.	Não deve utilizar o aparelho nos pequenos lábios, vagina, ânus, mamilos e aréolas. Os homens não devem utilizá-lo no rosto e escroto. Os pêlos faciais masculinos são diferentes dos pêlos faciais femininos e o acessório de precisão foi concebido para tratar unicamente pêlos faciais femininos.
	Utilizou uma intensidade de luz demasiado elevada para si.	Reduza a intensidade da luz para um nível confortável para si. Consulte o capítulo "Preparação para a utilização", secção "Intensidade da luz".
	A janela de saída da luz do acessório corporal ou o vidro do filtro do acessório de precisão está partido.	Se a janela de saída da luz do acessório corporal ou o vidro do filtro do acessório de precisão estiver partido, não volte a utilizar o aparelho com os bocais. Dirija-se ao seu revendedor ou a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente para que o acessório seja substituído.
As zonas tratadas ficam vermelhas após o tratamento.	Uma ligeira vermelhidão é inofensiva e normal e desaparece rapidamente.	Não é necessária qualquer acção.

Problema	Possível causa	Solução
A reacção da pele após o tratamento dura mais tempo do que o habitual.	Utilizou uma intensidade de luz demasiado elevada para si.	Seleccione uma intensidade da luz inferior da próxima vez. Consulte o capítulo "Preparar para a utilização", secção "Intensidade da luz". Se a reacção da pele durar mais do que 3 dias, contacte o seu médico.
Os resultados de redução do pêlo não são satisfatórios.	Utilizou uma intensidade de luz demasiado baixa para si.	Realize um teste de pele para determinar se pode utilizar uma intensidade da luz superior (consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Primeira utilização e teste de pele".
	Não fez sobreposições suficientes quando utilizou o aparelho.	Para obter resultados adequados de redução de pêlos, tem de sobrepor as aplicações ao utilizar o aparelho. Consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Utilizações seguintes", passo 4.
	Não utiliza o aparelho com a regularidade recomendada.	Para remover todos os pêlos com sucesso e evitar a reactivação da raiz do pêlo, os tratamentos têm de ser repetidos uma vez a cada duas semanas durante os dois primeiros meses. Para garantir que a sua pele se mantém suave, recomendamos a repetição do tratamento em intervalos de quatro a seis semanas. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos seus pêlos e também das diferentes zonas corporais. Se voltarem a crescer demasiados pêlos entre os tratamentos, basta reduzir novamente o intervalo entre os tratamentos, mas nunca efectue o tratamento com uma regularidade superior a cada duas semanas. Se utilizar o aparelho com uma regularidade superior à recomendada, não aumenta a eficácia do tratamento, mas aumenta o risco de reacções da pele.
	Responde mais lentamente ao tratamento por IPL que o utilizador médio.	Continue a utilizar o dispositivo durante, pelo menos, 6 meses, pois o crescimento do pêlo pode ainda diminuir ao longo deste período. Tenha também em conta as outras soluções para este problema.
	O aparelho não é adequado para o seu tom de pele ou de pêlo.	Não utilize o aparelho se o seu tom de pêlo for louro claro, ruivo, grisalho ou branco. Não utilize o aparelho também se tiver um tom de pele escuro. Consulte a tabela de tons de pele e cor do pêlo no guia de início rápido.

Problema	Possível causa	Solução
Os pêlos começam a crescer novamente em alguns pontos das zonas tratadas.	Não fez sobreposições suficientes quando utilizou o aparelho.	Para obter resultados adequados de redução de pêlos, tem de sobrepor as aplicações ao utilizar o aparelho. Consulte o capítulo "Utilizar o aparelho", secção "Utilizações seguintes", passo 4.
	Os pêlos começam a crescer novamente como parte do ciclo natural de crescimento do pêlo.	Isto é normal. O reaparecimento dos pêlos faz parte do ciclo natural de crescimento destes. No entanto, os pêlos que voltam a crescer são mais macios e finos.
O aparelho não funciona.	O aparelho está defeituoso.	Contacte o Centro de Assistência ao Cliente no seu país, o seu representante Philips ou um centro de serviço Philips.