

MANUAL DE INSTRUÇÕES REMOVEDOR DE CALOS

PHE/5642

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


Leia atentamente o manual de instruções do aparelho antes de colocá-lo em funcionamento. Mantenha o manual guardado em local seguro juntamente com o talão de compra, bem como a caixa original. Mantenha-o afastado de fontes de calor, luz directa do sol, humidades (NUNCA derrame líquidos em cima do aparelho). Não manuseie o aparelho com mãos molhadas. No caso do aparelho se encontrar com qualquer tipo de líquido ou humidade, retire imediatamente a ficha da tomada (puxe sempre pela ficha e não pelo cabo). Durante a sua limpeza, mantenha o aparelho desligado. No caso de não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo e guardá-lo juntamente com os seus acessórios em local seguro. Nunca o utilize quando detectada alguma avaria. Em caso de avaria técnica, não tente repará-lo sozinho. Contacte um técnico especializado para efectuar as reparações necessárias. Devem ser apenas utilizadas peças originais no aparelho. Use o dispositivo para uso privado. O dispositivo não se destina para uso comercial. Guarde o dispositivo fora do alcance das crianças. As crianças não podem brincar com o dispositivo.

Não exponha as baterias a temperaturas elevadas ou luz solar directa. Nunca mande baterias para o fogo. Diferentes tipos de pilhas ou baterias novas e gastas não podem ser utilizados juntos.

Cuidados de segurança com crianças

Para a segurança das crianças, deve manter afastados todos os acessórios da embalagem (plásticos, caixas, esferovite, etc.) uma vez que poderão tornar-se perigosos – **risco de asfixia**.

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS

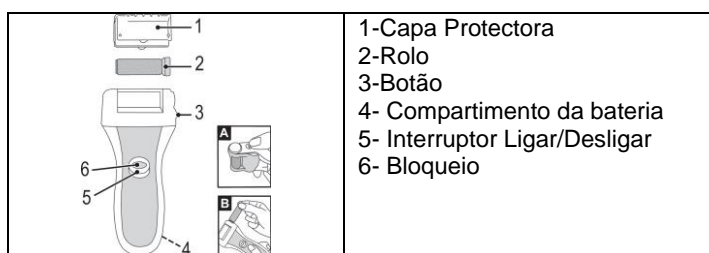

CARREGAMENTO DO APARELHO

1. Abra o compartimento da bateria no punho deslizando a tampa para baixo.
2. Insira duas pilhas do tipo AA/R6. Verifique se a polaridade está correcta (ver parte inferior do compartimento da bateria)!
3. Feche o compartimento da bateria.

DICAS DE FUNCIONAMENTO

Como é que este método de remoção de calos funciona?

O revestimento especial remove suavemente o excesso de pele. O rolo rotativo começa a trabalhar rapidamente nas áreas afetadas. O rolo diminui a velocidade quando a pressão sobre ele é maior, logo está protegido contra lesões. Não precisa de experiência em cuidados com os pés.

Para um tratamento mais eficaz:

- 1- Aplique sempre o rolo delicadamente.
- 2- Pode tratar áreas individuais várias vezes
- 3- Aplicar o rolo nas áreas afetadas em diferentes direções.

Quando não devo usar o aparelho?

Nunca use o aparelho na pele muito rachada ou em feridas abertas. Não usar em marcas de nascença ou sinais. Se sofre de doenças como diabetes, hemofilia ou deficiência imunológica, em primeiro lugar consulte o seu médico.

Tenho que fazer um pré-tratamento aos meus pés?

Não. O calo é melhor removido quando seco. Água ou creme de pele afecta a aplicação do tratamento. Se necessário, lave rapidamente os seus pés e os seca bem.

Mudar os rolos

Por razões de higiene, os rolos são codificados por cores para diferentes usuários. 1. Se você quiser limpar ou mudar um rolo, deslize o botão 3 para baixo. 2. O cilindro pode agora ser facilmente removido. 3. O rolo novo ou limpo encaixa no lugar do aparelho, pressionando suavemente.

Interruptor On / Off

Usar o bloqueio (6) para evitar que o aparelho se ligue acidentalmente. 1. Antes do uso, verifique novamente se o rolo foi correctamente instalado. 2. Pressione a o bloqueio para deslizar o interruptor para a posição ON ou OFF.

MANUTENÇÃO DO ARTIGO

Não mergulhe o aparelho em água. Isto poderá destruir o aparelho electrónico. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos. Desligue o aparelho antes de limpar. Pode limpar a caixa do aparelho com um pano ligeiramente húmido.

Rolo

- O rolo pode ser removido como descrito acima.
- Escove o rolo e revestimento também.
- Também pode lavar o rolo com água quente.
- Use um spray desinfectante para higienização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PHE 5642
Peso Líquido	105 g
Bateria	2x 1.5 V Tipo "AA" / "R6"

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE.

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios *) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem, nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

MEI EUROPA LDA
Linha Verde: 800 200 092
Website: www.mei.pt